

# Oticon ON Anleitung


ON-Benutzerkonto anlegen, um IFTTT nutzen zu können

## Was Sie dazu brauchen:

Oticon Opn · iPhone 5 (oder neuer) · Oticon ON App

1

Öffnen Sie die ON App auf Ihrem iPhone.

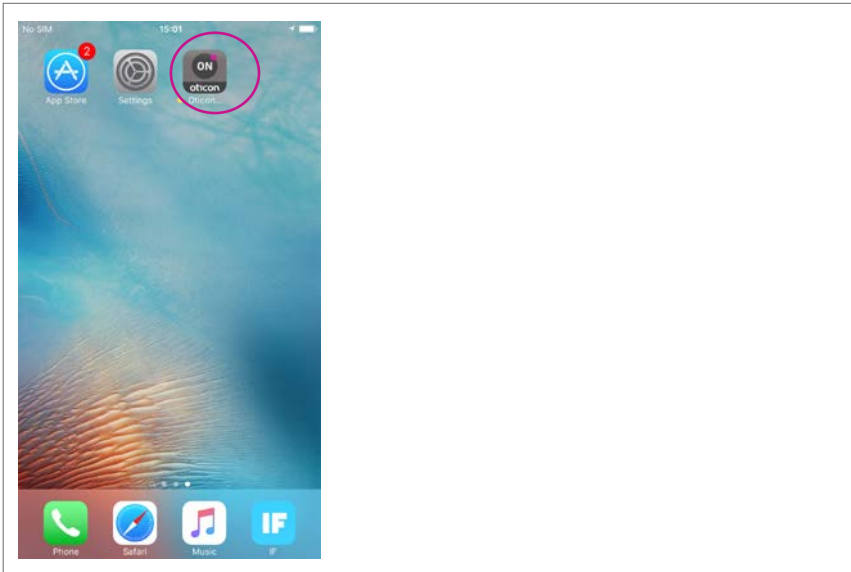


**Hinweis:** Wenn Sie die ON App das erste Mal öffnen, werden Sie gebeten, Ihren Standort mitzuteilen. Klicken Sie auf „erlauben“ (Allow), wenn Sie die Funktion „Hörsysteme finden“ nutzen möchten.

Allow "Oticon ON" to access your location even when you are not using the app?  
The app uses location services to help you find your hearing aids.


Don't Allow Allow

Folgen Sie der Anleitung für die ON App.

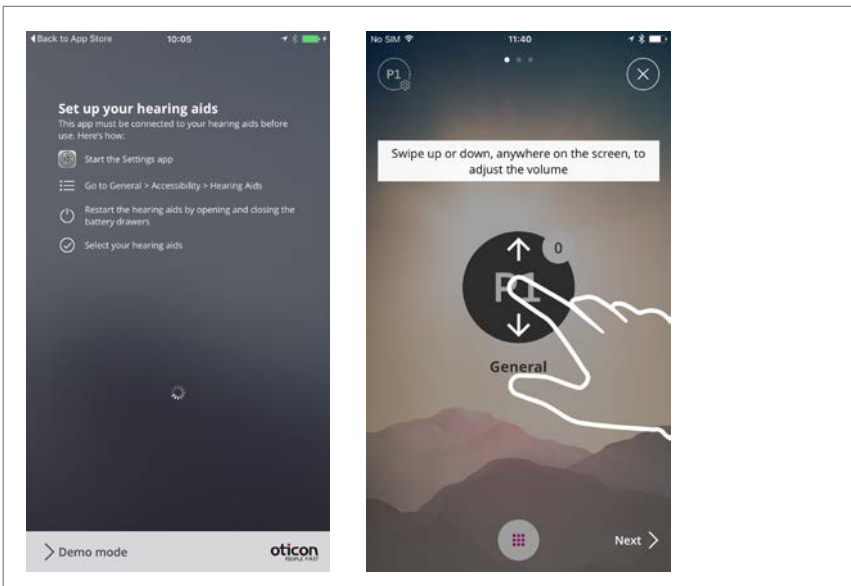


2

Klicken Sie auf die Menü-Schaltfläche und danach auf die IF-Schaltfläche.

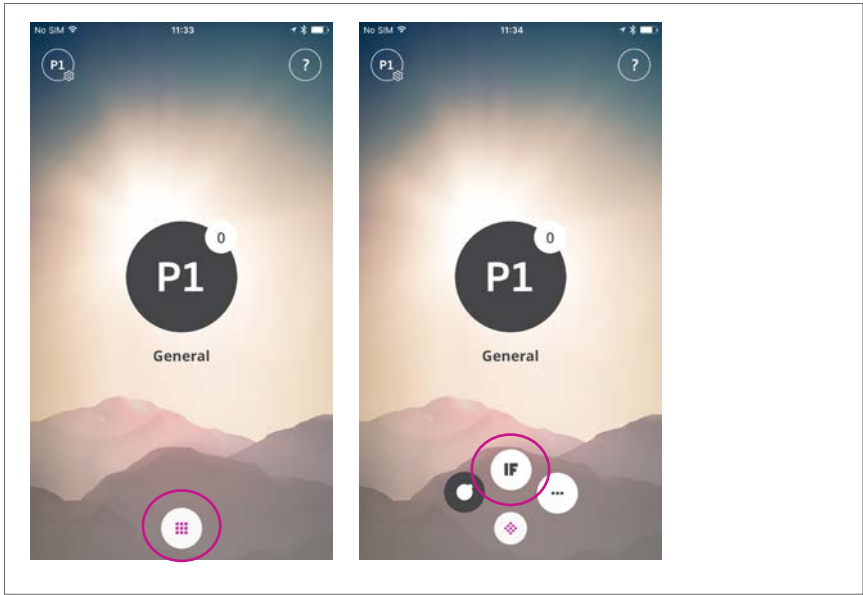

3

Klicken Sie auf „Los geht’s“.

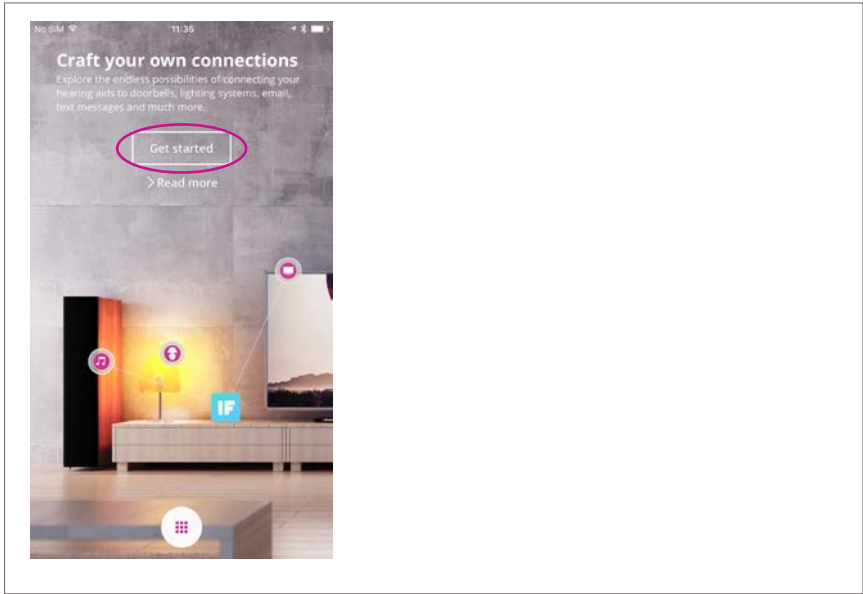


4

Falls Sie bereits ein ON-Benutzerkonto haben, melden Sie sich an. Falls nicht, können Sie auch Ihr Facebook- oder Google-Benutzerkonto dazu benutzen (siehe Schritt 4a). Oder Sie setzen dafür Ihre E-Mail-Adresse ein (siehe Schritt 4b).

4a

#### Anmelden mithilfe des Facebook- oder Google-Benutzerkontos

Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort Ihres Facebook- oder Google-Benutzerkontos an und klicken Sie anschließend auf „akzeptieren“.

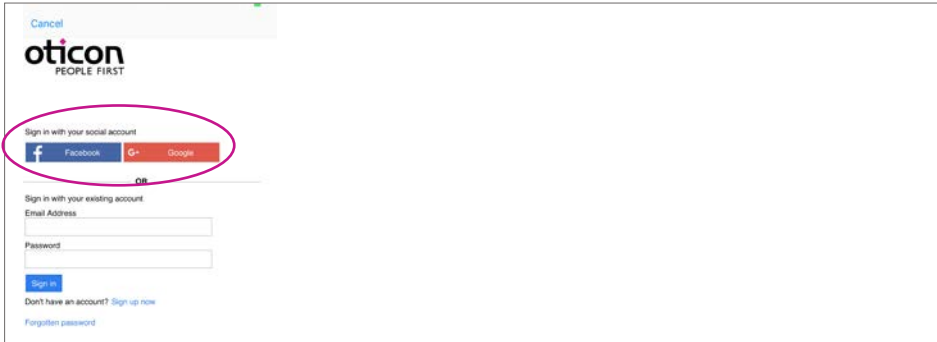


The screenshot shows the Oticon login interface. At the top, there is a 'Cancel' button and the Oticon logo with the tagline 'PEOPLE FIRST'. Below the logo, there are two options for signing in with a social account: Facebook and Google. These buttons are circled in pink. Below this, there is an 'OR' separator and a section for signing in with an existing account, which includes fields for 'Email Address' and 'Password', and a 'Sign in' button. At the bottom, there is a link for 'Don't have an account? Sign up now' and a link for 'Forgotten password'.

4b


#### Anmelden mit Ihrer E-Mail-Adresse

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse anmelden möchten, klicken Sie auf „Sign up now“ (jetzt anmelden). Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie danach auf „Send verification code“ (Bestätigungscode senden).

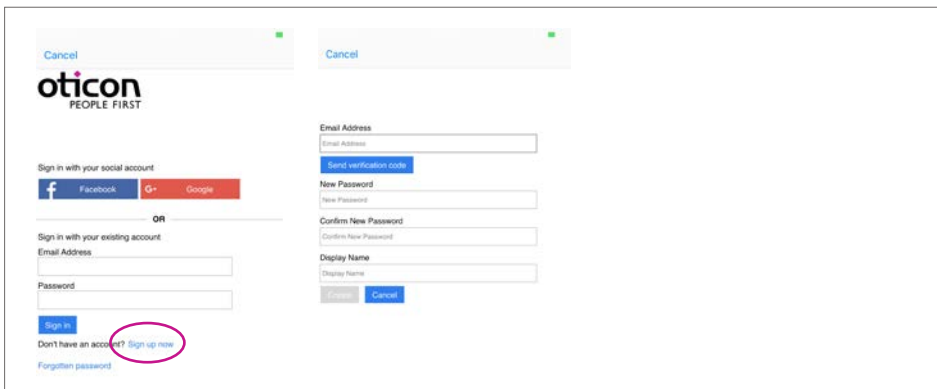


The screenshot shows the Oticon sign-up interface. On the left, there are options for signing in with a social account (Facebook and Google) and an 'OR' separator. Below this, there is a section for signing in with an existing account, which includes fields for 'Email Address' and 'Password', and a 'Sign in' button. At the bottom, there is a link for 'Don't have an account? Sign up now' circled in pink. On the right, there is a section for creating a new account, which includes fields for 'Email Address', 'New Password', 'Confirm New Password', and 'Display Name', and buttons for 'Send verification code', 'Create', and 'Cancel'.

Öffnen Sie Ihr E-Mail-Programm. Dort finden Sie die Bestätigungs-Mail. Übertragen Sie den Bestätigungscode in das Feld „Verification code“ Ihrer ON App. Klicken Sie dann auf „Verify code“ (Code bestätigen).

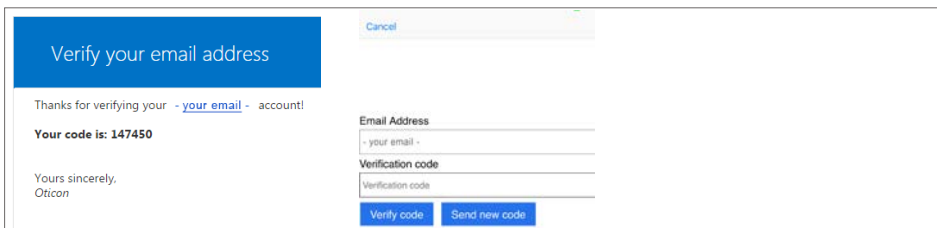

The screenshot shows an email verification screen. At the top, there is a blue header with the text 'Verify your email address' and a 'Cancel' button. Below the header, there is a message: 'Thanks for verifying your - your email - account!'. Below this, there is a line of text: 'Your code is: 147450'. Below that, there is a signature: 'Yours sincerely, Oticon'. On the right, there is a form with fields for 'Email Address' (containing '- your email -'), 'Verification code' (containing 'Verification code'), and buttons for 'Verify code' and 'Send new code'.

Tragen Sie Ihr neues Passwort für Ihr Benutzerkonto ein und bestätigen Sie dieses. Wählen Sie den Namen, der auf dem Bildschirm erscheinen soll, wenn Sie angemeldet sind, und klicken Sie dann auf „Create“ (anlegen).

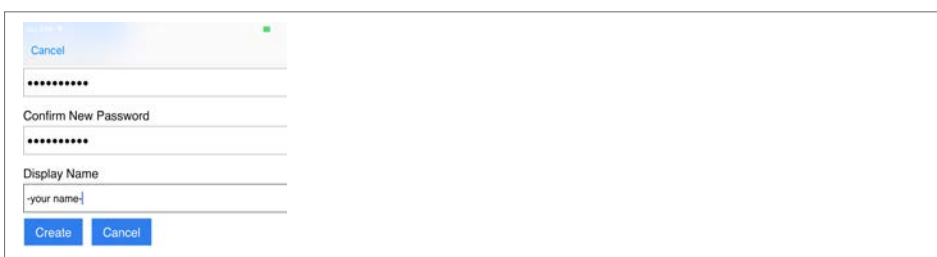

The screenshot shows the Oticon account creation screen. At the top, there is a 'Cancel' button. Below it, there are three input fields: the first is for a new password (masked with dots), the second is for confirming the new password (masked with dots), and the third is for the display name (containing '-your name-'). At the bottom, there are two buttons: 'Create' and 'Cancel'.

# 5

Stellen Sie sicher, dass IFTTT und Benachrichtigungen aktiv sind, indem Sie die beiden kleinen Schalter nach rechts wischen. Dann erscheinen sie in Grün.

